

GUIDE DE L'UTILISATEUR



belle®
series **W**

COMMENT CHARGER BELLE

IMPORTANT: Chargez complètement Belle avant la première utilisation et lorsque le voyant rouge de la batterie clignote lorsque vous n'êtes pas sur le chargeur, afin de garantir le bon fonctionnement de l'appareil.

Branchez le socle de chargement et placez Belle dans le socle comme indiqué. Belle indiquera "En chargement".

Le temps de charge typique est de 2 à 3 heures. Le voyant rouge de la batterie clignote toutes les 5 secondes pendant la charge et reste rouge lorsque Belle est complètement chargée.

REMARQUE : La durée de vie de la batterie varie en fonction des paramètres sélectionnés par votre revendeur. Veuillez contacter votre revendeur pour toute question. Ne chargez la batterie que si vous en avez besoin. Portez votre appareil aussi souvent que possible pour être protégé. Si la batterie est faible, l'appareil indique "Batterie faible, veuillez la charger" ou "Appel échoué, batterie trop faible" lorsque vous appuyez sur le bouton d'appel. Il s'éteint ensuite.

COMMENT CHARGER BELLE

1

Repérez les broches de chargement dorées au dos de votre appareil Belle W.


Broches de chargement



2

Branchez le socle de chargement et attendez que le voyant rouge s'allume.

Alignez les broches dorées du Belle W avec l'une ou l'autre des broches dorées du socle de charge.

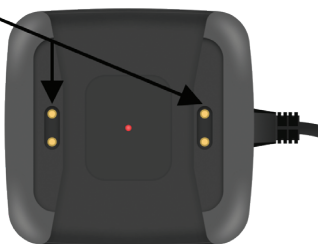


3

Placez l'appareil sur le socle et attendez le message sonore de "charge". Lorsque l'appareil Belle W est en charge, le voyant rouge clignote toutes les 5 secondes.



RENCONTREZ VOTRE BELLE W

1. Bouton d'appel
2. Voyant d'appel bleu /
Voyant de batterie rouge
3. Haut-parleur
4. Microphones
5. Broches de chargement

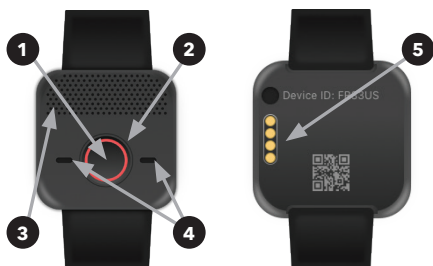

Voyant rouge de la batterie autour du bouton d'appel

- Pendant le chargement, le voyant rouge de la batterie clignote toutes les 5 secondes jusqu'à ce que l'appareil soit complètement chargé.
- Une fois le chargement terminé, le voyant rouge de la batterie ne clignotera plus.
- Si la batterie est faible, le voyant rouge de la batterie clignote lentement lorsqu'il n'est pas sur le socle de chargement.

Voyant de connexion bleu autour du bouton d'appel

- Lors d'un appel SOS, la lumière bleue reste allumée.
- Le voyant bleu clignote également toutes les 5 secondes pendant la charge.
- Le voyant peut clignoter en bleu toutes les 26 secondes lorsqu'il n'est pas sur le socle, selon le mode de fonctionnement.
- Si la lumière bleue clignote à chaque seconde, ou si elle clignote deux fois, veuillez contacter votre revendeur pour obtenir de l'aide.

COMMENT APPELER À L'AIDE

1. Maintenez le bouton d'appel enfoncé et comptez jusqu'à 3 ou jusqu'à ce que le voyant autour du bouton d'appel de Belle® devienne bleu, puis relâchez le bouton.
2. Après un court délai, vous entendrez un message vocal, puis des tonalités ou une sonnerie.
3. Le spécialiste répondra à l'appel.
4. Le spécialiste peut envoyer du personnel d'urgence ou des proches pour vous aider.

*** Si votre Belle ne se connecte pas correctement, veuillez contacter votre revendeur immédiatement.**

TEST HEBDOMADAIRE DE BELLE

Nous vous recommandons de tester Belle chaque semaine.

1. Pour tester, appuyez sur le bouton d'appel et maintenez-le enfoncé, puis comptez jusqu'à 3 ou jusqu'à ce que le voyant devienne bleu, puis relâchez le bouton.
2. Après un court délai, vous entendrez un message vocal, puis des tonalités ou une sonnerie.
3. Le spécialiste répondra à l'appel.
4. Informez le spécialiste que vous faites un test.

*** Si votre Belle n'est pas testée correctement, veuillez contacter votre revendeur immédiatement.**

REEMPLACER LE BRACELET

1. Retournez Belle W et repérez les petites goupilles argentées à dégagement rapide sur chaque sangle de poignet.
2. Pour retirer les bracelets existants, faites glisser la goupille de dégagement rapide vers le centre de l'appareil et faites pivoter le bracelet pour l'éloigner de l'appareil.
3. Pour mettre le nouveau bracelet sur l'appareil, insérez un côté de la barre horizontale du nouveau bracelet dans l'appareil, puis faites glisser la goupille de dégagement rapide vers le centre de l'appareil.
4. Faites pivoter la sangle dans l'appareil, en faisant glisser la goupille de dégagement rapide en position une fois que la sangle est fermement insérée dans l'appareil.

**Goupille à
dégagement rapide**



NETTOYAGE HEBDOMADAIRE

Nous vous recommandons de nettoyer Belle une fois par semaine pour garantir un chargement correct.

Prenez un chiffon doux, tel qu'un chiffon de nettoyage pour lunettes, et frottez doucement les contacts dorés de l'appareil et du socle de charge pour éliminer la saleté, l'huile et les débris.

Vous pouvez également vaporiser un nettoyant ménager sur le chiffon de nettoyage (sans toutefois le vaporiser directement sur l'appareil ou le berceau) pour éliminer les débris.

Exemple d'un client de Belle W qui nettoie les contacts de charge en or sur le fond de la Belle W.



Exemple d'un client de Belle W qui nettoie les trous du haut-parleur sur le dessus de la Belle W.



Couverture :

Ce produit nécessite une couverture cellulaire adéquate pour fonctionner correctement. Il est important de tester l'appareil pour savoir s'il fonctionne dans votre région. N'oubliez pas que les conditions environnementales et topographiques peuvent également affecter votre couverture. Si vous rencontrez des problèmes de couverture, contactez immédiatement votre revendeur.

Chargement :

La durée de vie de la batterie varie en fonction des paramètres sélectionnés par votre revendeur. Veuillez contacter votre revendeur pour toute question. Portez votre appareil en permanence et ne le rechargez qu'en cas de besoin. Si vous ne respectez pas les procédures de chargement, l'appareil ne pourra pas fonctionner correctement.

Résistant à l'eau :

Belle® est étanche selon la norme IP67. Belle ne doit pas être immergé. Belle doit être séché à l'aide d'une serviette après avoir été exposé à l'eau.

Stimulateurs cardiaques :

Les personnes portant un stimulateur cardiaque doivent consulter leur médecin et revoir les documents relatifs à leur stimulateur cardiaque concernant l'interaction avec les téléphones cellulaires, et prendre les mêmes précautions que celles recommandées pour cet appareil.

Z ET ACCEPTEZ LES INFORMATIONS SUIVANTES :

Services basés sur la localisation :

Certains équipements utilisent une technologie permettant à des tiers, y compris le centre de surveillance, de déterminer où vous vous trouvez physiquement à un moment donné (les "services de géolocalisation"). Les services de localisation peuvent fonctionner même si vous n'êtes pas en communication avec le centre de surveillance. La précision des services de localisation est limitée et la Société, les opérateurs, le centre de surveillance, les intervenants ou d'autres personnes peuvent ne pas être en mesure d'identifier votre emplacement ou l'emplacement de l'équipement de manière précise ou pas du tout. Vous autorisez la Société de collecter des informations basées sur la localisation. Nous ne partagerons vos informations de géolocalisation qu'avec les opérateurs, le centre de surveillance, les intervenants, toute personne ou entité qui acquiert la société et/ou les intérêts de la société dans les services de surveillance, ou toute autre personne ou entité que vous aurez spécifiquement désignée et qui aura été désignée par vous et uniquement dans le but de fournir et d'améliorer les services de suivi.

TOUTES LES INFORMATIONS BASÉES SUR LA LOCALISATION SONT MISES À DISPOSITION À DES FINS D'INFORMATION ET DE PLANIFICATION UNIQUEMENT ET NE SONT PAS DESTINÉES À ÊTRE UTILISÉES DANS DES SITUATIONS OÙ DES INFORMATIONS DE LOCALISATION PRÉCISES SONT NÉCESSAIRES OU LORSQUE DES DONNÉES DE LOCALISATION OU DES DONNÉES CARTOGRAPHIQUES ERRONÉES, INEXACTES, RETARDÉES OU INCOMPLÈTES PEUVENT ENTRAÎNER LA MORT, DES BLESSURES CORPORELLES, DES DOMMAGES MATÉRIELS OU ENVIRONNEMENTAUX OU DES DOMMAGES À L'ENVIRONNEMENT. VOUS ACCEPTEZ QUE LES INFORMATIONS BASÉES SUR LA LOCALISATION PUISSENT VARIER PAR RAPPORT AUX LIEUX, ITINÉRAIRES OU TERRAINS RÉELS EN RAISON DE FACTEURS SUSCEPTIBLES D'AFPECTER LA PRÉCISION DES DONNÉES CARTOGRAPHIQUES, TELS QUE, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES, ROUTIÈRES ET DE CIRCULATION, LES ÉVÉNEMENTS GÉOPOLITIQUES ET L'ÉTAT OU LA SITUATION DE VOTRE TÉLÉPHONE CELLULAIRE OU DES SERVICES CELLULAIRES. NOUS NE GARANTISSONS PAS L'EXACTITUDE OU L'EXHAUSTIVITÉ DES INFORMATIONS GÉOLOCALISÉES.

FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement. Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il ne garantit pas que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise de courant d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

IC

This device contains licence-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Fabricant :

Freeus, LLC

www.freeus.com